



Poltrone relax

13

358 Poltrona relax "Ortomedika"

359 Poltrone relax elevabili e manuali

363 Poltrona relax elevabile di grandi dimensioni

364 Poltrone da riposo

01972 ORTOMEDIKA® 2EL

Poltrona da riposo **elevabile a due motori** per una piena indipendenza dei movimenti dello schienale e del poggiatesta, regolabili elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione (28V). L'ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione, o di rilassamento e digestione, o di elevazione ed inclinazione in avanti mantenendo le curve fisiologiche della colonna vertebrale. Durante la movimentazione la persona può assumere tutte le posizioni intermedie. L'elevazione avviene in massima sicurezza supportata dalla solida struttura che si appoggia al pavimento e da un movimento dolce e continuo. **Lo schienale è stato disegnato con le curve che supportano la fisiologica lordosi lombare, cifosi dorsale e lordosi cervicale.** È dotata di un'ampia tasca laterale destra e di quattro ruote piroettanti. La seduta ed il poggiatesta sono stati realizzati con un unico cuscino e rivestimento che consente un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori.

Tutte le parti della poltrona

a contatto con l'utilizzatore sono asportabili e sfoderabili.

Peso kg 53. Portata kg 120



01971 ORTOMEDIKA® M

Poltrona anatomica **non elevabile regolabile in modo manuale**, con una leggera pressione sui braccioli. L'ausilio permette di assumere le posizioni di lettura e televisione, o di rilassamento e digestione mantenendo le curve fisiologiche della colonna vertebrale. **Lo schienale è stato disegnato con le curve che supportano la fisiologica lordosi lombare, cifosi dorsale e lordosi cervicale.**

È dotata di tasca laterale destra e di quattro ruote piroettanti. La seduta ed il poggiatesta sono stati realizzati con un unico cuscino e rivestimento che consente un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori. Tutte le parti della poltrona a contatto con l'utilizzatore sono asportabili e sfoderabili.

Peso kg 39. Portata kg 120

La poltrona ORTOMEDIKA® è stata progettata per permettere il mantenimento delle curve fisiologiche della colonna vertebrale



RIVESTIMENTI

Similpelle




Importante: in caso di ordine d'acquisto si prega di indicare insieme al codice della poltrona il codice del rivestimento scelto.

Microfibra



Nota: la riproduzione fotografica dei colori può non essere totalmente esatta rispetto ai colori originali.

DIMENSIONI

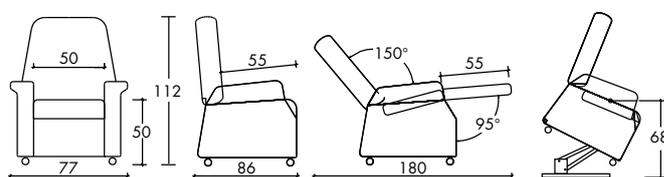

01230 FANNY 2EL

Poltrona da riposo **elevabile a due motori** per una piena indipendenza dei movimenti dello schienale e del poggiatesta, regolabili elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione (28V). L'ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione, o di rilassamento e digestione, o di elevazione ed inclinazione in avanti. Durante la movimentazione la persona può assumere tutte le posizioni intermedie. L'elevazione avviene in massima sicurezza supportata dalla solida struttura che si appoggia al pavimento e da un movimento dolce e continuo. **Questa versione permette di reclinare maggiormente lo schienale, di allungare maggiormente il poggiatesta di cm 10** e di ottenere, nella posizione di rilassamento e digestione, un basculamento della poltrona che aumenta ulteriormente l'elevazione degli arti inferiori con conseguente miglioramento della posizione per reflusso venoso e per minor pressione sui dischi.

E' dotata di un'ampia tasca laterale destra e di quattro ruote piroettanti.

La seduta ed il poggiatesta sono stati realizzati con un unico cuscino e rivestimento che consente un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori. Peso kg 52. Portata kg 120

**33620 FANNY M**

Poltrona da riposo **non elevabile regolabile in modo manuale**, con una leggera pressione sui braccioli. L'ausilio permette di assumere le posizioni di lettura e televisione, o di rilassamento e digestione.

E' dotata di tasca laterale destra e di quattro ruote piroettanti. La seduta ed il poggiatesta sono stati realizzati con un unico cuscino e rivestimento che consente un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori.

Il trasporto della poltrona è agevolato dal sistema a baionetta che permette di estrarre lo schienale. Peso kg 36. Portata kg 120

Con il modello a 2 motori si ottiene un'inclinazione maggiore dello schienale e un'ulteriore allungamento del poggiatesta

RIVESTIMENTI**Similpelle**

WP

WD

W2

W4

WF

Importante: in caso di ordine d'acquisto si prega di indicare insieme al codice della poltrona il codice del rivestimento scelto.

Microfibra

M8


M9

M10

M11

M12

Nota: la riproduzione fotografica dei colori può non essere totalmente esatta rispetto ai colori originali.

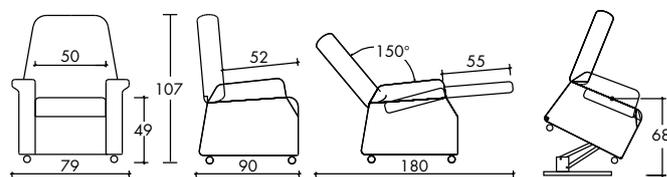DIMENSIONI

Poltrone Relax *elevabili e manuali*

01234 ANDREA 2EL

Poltrona da riposo **elevabile a due motori** per una piena indipendenza dei movimenti dello schienale e del poggiatesta, regolabili elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione (28V). L'ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione, o di rilassamento e digestione, o di elevazione ed inclinazione in avanti. Durante la movimentazione la persona può assumere tutte le posizioni intermedie.

L'elevazione avviene in massima sicurezza supportata dalla solida struttura che si appoggia al pavimento e da un movimento dolce e continuo.

Questa versione rispetto a quella ad un motore permette di reclinare maggiormente lo schienale, di allungare maggiormente il poggiatesta di cm 10 e di ottenere, nella posizione di rilassamento e digestione, un basculamento della poltrona che aumenta ulteriormente l'elevazione degli arti inferiori con conseguente miglioramento della posizione per reflusso venoso e per minor pressione sui dischi.

E' dotata di due tasche laterali e di quattro ruote piroettanti.

La seduta ed il poggiatesta sono stati realizzati con un unico cuscino e rivestimento che consente un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori. Tutte le parti della poltrona a contatto con l'utilizzatore sono asportabili e sfoderabili.

Peso kg 65

Portata kg 120



Con questo modello si ottiene un'inclinazione maggiore dello schienale e un'ulteriore allungamento del poggiatesta di cm 10



RIVESTIMENTI

Similpelle

WP

WD

W2

W4

WF

Importante: in caso di ordine d'acquisto si prega di indicare insieme al codice della poltrona il codice del rivestimento scelto.

Microfibra

M8

M9


M10

M11

M12

Nota: la riproduzione fotografica dei colori può non essere totalmente esatta rispetto ai colori originali.

DIMENSIONI

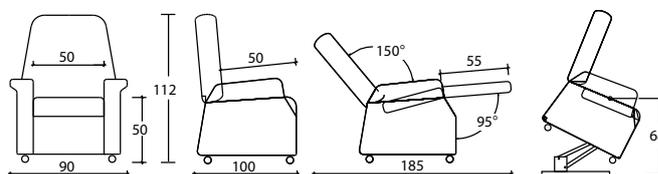

01834 SALLY 2EL

Poltrona **elevabile** e per relax a **due motori**. La poltrona dispone di due movimenti indipendenti, dello schienale e del poggiatesta regolabili elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione (28V). L'ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione o di rilassamento oppure di elevazione ed inclinazione in avanti per facilitare le operazioni di seduta o di sollevamento dell'utente. La persona può assumere durante la movimentazione tutte le posizioni intermedie desiderate. Peso kg 56. Portata kg 120

01835 SALLY 4EL-BASCULA


Poltrona **elevabile** e per relax a **quattro motori**. La poltrona offre la massima autonomia nei movimenti indipendenti dello schienale, del poggiatesta e dell'angolo di seduta della poltrona rispetto al suolo.

Questi movimenti vengono regolati elettricamente tramite una pulsantiera a bassa tensione (28V). L'ausilio permette di assumere quindi la posizione di lettura e televisione di rilassamento o di sollevamento ma con i suoi **quattro motori è possibile anche l'elevazione in verticale, di bascula e di Trendelenburg.**

Peso kg 63. Portata kg 120

**01973 SALLY M**

Poltrona **non elevabile** regolabile in modo **manuale** con una pressione sui braccioli. Peso kg 50. Portata kg 120

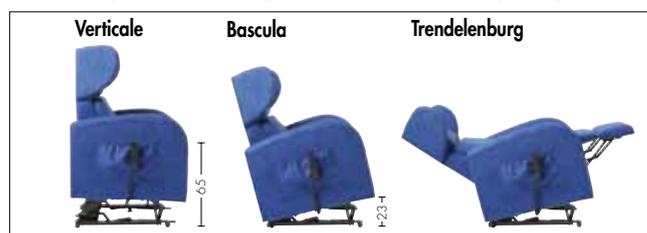Posizioni possibili con due motori...**...ma con quattro motori si possono ottenere anche queste posizioni****RIVESTIMENTI****Similpelle**

WP

WD

W2

W4

WF

Importante: in caso di ordine d'acquisto si prega di indicare insieme al codice della poltrona il codice del rivestimento scelto.

Microfibra

M8


M9

M10

M11

M12

Nota: la riproduzione fotografica dei colori può non essere totalmente esatta rispetto ai colori originali.

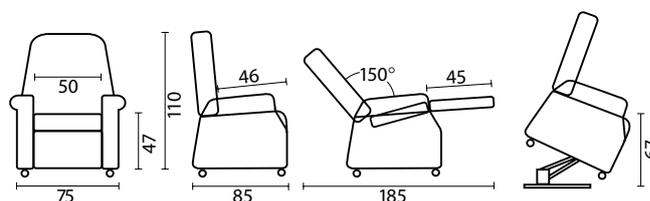DIMENSIONI

Poltrone Relax *elevabili e manuali*

01832 PETRA 2EL

Poltrona **elevabile** e per relax a **due motori**. La poltrona dispone di due movimenti indipendenti, dello schienale e del poggiatesta regolabili elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione (28V).

L'ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione o di rilassamento oppure di elevazione ed inclinazione in avanti per facilitare le operazioni di seduta o di sollevamento dell'utente.

La persona può assumere durante la movimentazione tutte le posizioni intermedie desiderate.

Peso kg 58. Portata kg 120

01833 PETRA 4EL-BASCULA

Poltrona **elevabile** e per relax a **quattro motori**.

La poltrona offre la massima autonomia nei movimenti indipendenti dello schienale, del poggiatesta e dell'angolo di seduta della poltrona rispetto al suolo. Questi movimenti vengono regolati elettricamente tramite una pulsantiera a bassa tensione (28V). L'ausilio permette di assumere quindi la posizione di lettura e televisione di rilassamento o di sollevamento ma con i suoi **quattro motori è possibile**

anche l'**elevazione in verticale**, di **bascula** e di **Trendelenburg**.

Peso kg 65. Portata kg 120



01974 PETRA M


Poltrona **non elevabile** regolabile in modo **manuale** con una pressione sui braccioli.

Peso kg 50. Portata kg 120

Posizioni possibili con due motori...



...ma con quattro motori si possono ottenere anche queste posizioni

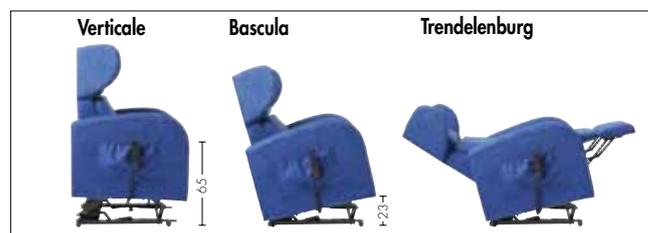

RIVESTIMENTI

Similpelle




Importante: in caso di ordine d'acquisto si prega di indicare insieme al codice della poltrona il codice del rivestimento scelto.

Microfibra



Nota: la riproduzione fotografica dei colori può non essere totalmente esatta rispetto ai colori originali.

DIMENSIONI

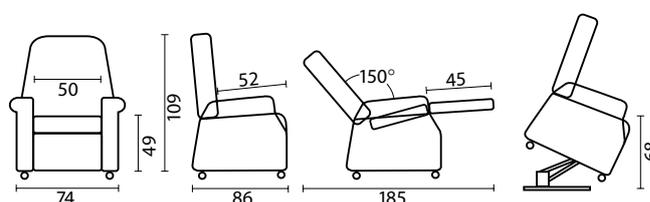

01889 EXTRA LARGE

Poltrona **elevabile** e per relax **di grandi dimensioni** (seduta da **cm 65** di larghezza) a **tre motori**, per una piena indipendenza dei movimenti dello schienale e del poggiatesta, regolabili elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione. L'ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione o di rilassamento oppure di elevazione ed inclinazione in avanti per facilitare le operazioni di seduta o di sollevamento dell'utente. È dotata di una tasca laterale. La poltrona appoggia sulla struttura portante in acciaio (senza ruote) per garantire massima tenuta per un carico di **portata che arriva a kg 250**. Peso kg 66



RIVESTIMENTI

Similpelle




Importante: in caso di ordine d'acquisto si prega di indicare insieme al codice della poltrona il codice del rivestimento scelto.

Microfibra



Nota: la riproduzione fotografica dei colori può non essere totalmente esatta rispetto ai colori originali.

DIMENSIONI

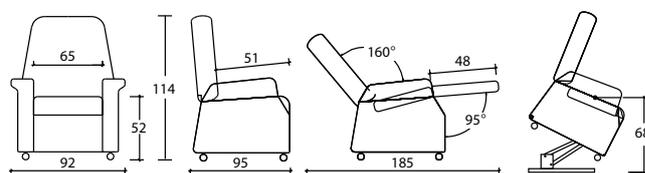

Poltrone Relax da riposo



Poltrona con ruote e pedana ribaltabile (vedi accessorio)



Bracciolo ribaltabile a scomparsa

33870 PAOLA UNO

Poltrona da riposo con braccioli imbottiti fissi. Struttura in acciaio verniciato. Regolazione assistita ed indipendente dello schienale e del poggiatesta con ritorno automatico degli stessi mediante molla a gas.

Rivestimento totalmente sfoderabile. Alla poltrona possono essere applicate le ruote con pedana (cod. 33885).

Peso kg 22

33880 PAOLA DUE


Poltrona da riposo con braccioli ribaltabili.

Struttura in acciaio verniciato. Regolazione assistita ed indipendente dello schienale e del poggiatesta con ritorno automatico degli stessi mediante molla a gas.




Rivestimento totalmente sfoderabile. Alla poltrona possono essere applicate le ruote con pedana (cod. 33885).

Peso kg 22



DIMENSIONI

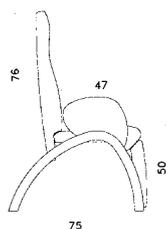

Paola Uno

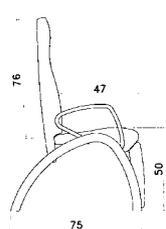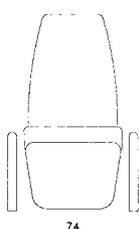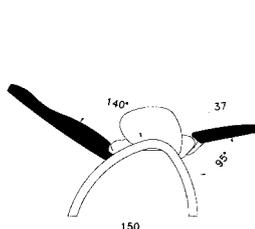

Paola Due

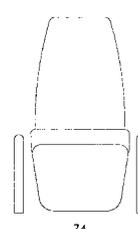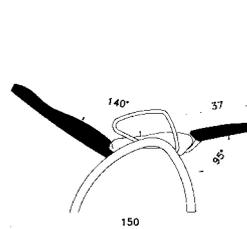

RIVESTIMENTI

Similpelle



Importante: in caso di ordine d'acquisto si prega di indicare insieme al codice della poltrona il codice del rivestimento scelto.

Microfibra



Nota: la riproduzione fotografica dei colori può non essere totalmente esatta rispetto ai colori originali.

ACCESSORIO



33885

KIT RUOTE PAOLA
Quattro ruote di cui due con freni e due con pedana ribaltabile a scomparsa.

01189**TINA**

Poltrona con struttura in faggio massello **regolabile in modo manuale** esercitando una leggera spinta sui braccioli.

La meccanica bilanciata permette di alzare prima il poggiatesta, ed in un secondo momento di reclinare lo schienale. E' possibile, quindi, assumere la posizione di lettura e televisione, o di rilassamento

e digestione. I braccioli sono sagomati a becco per una migliore presa e tutti gli spigoli sono arrotondati. L'imbottitura dello schienale è anatomica ed è dotata lateralmente di due rigonfiamenti per un miglior sostegno della zona lombare.

Il rivestimento della seduta è sfoderabile. L'altezza dello schienale consente le situazioni di riposo con un buon supporto a livello lombare, dorsale e cervicale.

Peso kg 27

**RIVESTIMENTI****Tessuti spalmati PVC****P6****P7****P8**

Importante: in caso di ordine d'acquisto si prega di indicare insieme al codice della poltrona il codice del rivestimento scelto.

Nota: la riproduzione fotografica dei colori può non essere totalmente esatta rispetto ai colori originali.

DIMENSIONI